

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL

使用说明书

保証書付

要保管

# VZUSA



※ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

# 目次

- 取扱説明書に関するご注意 \_\_\_\_\_ p. 2
- 正しく安全にご使用いただくために \_\_\_\_\_ p. 2~3
- 使用前のご注意 \_\_\_\_\_ p. 4
- 使用中のご注意 \_\_\_\_\_ p. 5
- 保守・点検のご注意 \_\_\_\_\_ p. 6
- 各部の名称 \_\_\_\_\_ p. 7~8
- 機能の説明 \_\_\_\_\_ p. 9
- 本体操作方法 \_\_\_\_\_ p. 10
- トリートメント手順 \_\_\_\_\_ p. 11
- トリートメント手順 (Face) \_\_\_\_\_ p. 12~13
- トリートメント手順 (Body) \_\_\_\_\_ p. 14~15
- 製品仕様 \_\_\_\_\_ p. 16
- 保証規定 \_\_\_\_\_ p. 17
- MEMO \_\_\_\_\_ p. 53~54
- 保証書 \_\_\_\_\_ 裏表紙


## 取扱説明書に関するご注意


- この度は弊社商品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。  
取扱説明書は本機器を安全にお使いいただくために必要です。本機器を人に貸したり、差し上げる時には必ずこの取扱説明書を一緒にお渡してください。
- この取扱説明書には保証書がついています。  
「ご購入日・ご購入店舗」などの記入を必ず確かめ、大切に保管してください。


## 正しく安全にご使用いただくために

**ご使用の前に必ず本紙をお読みになり、正しくご使用ください。**

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のような表示をしています。警告サインの表示と意味は次のようになっています。

 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害※が発生するおそれがある内容」です。  
※家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### ■図記号



してはいけない「禁止」を示しています。  
※図の中や近傍に具体的な内容が書かれています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

# 正しく安全にご使用いただくために

## ⚠ 警告

### 事故や体調不良などを防ぐために

- 次のような医用電子機器を装着している人は、本機器を使用しないでください。

医用電子機器の誤作動は、事故や体調不良の原因となります。

- ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
- 人工心肺などの生命維持用電子機器
- 心電計や点滴器などの装着型の医用電子機器



禁止

- 以下の人は使用しないでください

- 心臓疾患・血圧異常時・悪性腫瘍
- 発熱を伴う疾患・感染症疾患・急性疾患
- 歯の治療中
- エイズなどの免疫性疾患による免疫力の低下、または免疫抑制剤を使用している人
- 血友病疾患・出血性疾患・糖尿病・顔面神経痛
- 知覚・痛覚異常のある人
- ケロイド体質・顔面黒皮症・光過敏症・色素異常
- ステロイドホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起している人
- アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚病・敏感肌または肌の弱い人
- てんかんの既往のある人・光の点滅で気分が悪くなる人
- 交通事故などによる頭部及び眼科の後遺症のある人
- 目の手術を行った人(レーシックの場合、医師にご相談の上ご使用ください)
- 妊娠中・生理中・授乳中
- 幼児・自分で意思表示のできない人
- 酒気帯び・二日酔いの人
- 眠気を誘う薬を服用中の人
- 疲労の激しい人・体調のすぐれない人
- 化学繊維でシミ・かぶれ等の肌トラブルのあった人
- 化粧品による皮膚炎を起こしている人・起こした人
- エステ等でケミカルピーリングをした直後の人
- 美容機器の使用後に肌トラブルのあった人



禁止

- 以下の部位には使用しないでください

- 指定された部位以外
- 心臓周辺・眼球及び上まぶた・唇や口の中など粘膜の部位
- 陰部・肛門・のどぼとけ周辺・耳
- 病的なシミ・ホクロ・ウィルス性のイボのある部位
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位
- 傷口・湿疹・乾癬・ヘルペス・化膿したニキビ・吹き出物のある部位
- 痒みや火照り、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 手術した部位
- 脱毛や剃毛処理をした直後の部位



禁止

※通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。

# 使用前のご注意

## ⚠ 警告

- 他の美容機器とは同時に使用しないでください。
- 美容目的以外の使用や、破損・故障した状態で使用しないでください。本機器は美容専門のトリートメント機器です。治療目的など、用途以外に使用しないでください。
- LED光を覗いたり、直視をしないでください。
- 同じ部位への連続使用はしないでください。肌を傷つけたり、感染症・炎症・出血・色素沈着などのトラブルや症状悪化の恐れがあります。
- アルコール成分が含まれている美容液を使用しないでください。肌トラブルになる恐れがあります。
- ペットには使用しないでください。
- 引火性のものの近くで使用しないでください。  
※シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど
- 専用ACアダプター以外で使用しないでください。専用ACアダプターを他の機器に接続しないでください。(火災・感電・故障の原因)
- ケーブルを傷めないでください。  
※傷つける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込むなど(火災・感電・故障の原因)
- たこ足配線をしないでください。(発熱・火災の原因)



禁止



水場使用禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



プラグを抜く



必ず守る

- 浴室や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。水のかかりやすい場所(洗面台の上など)に置かないでください。
- 水に浸けたり、かけたり、こぼしたりしないでください。(感電・火災・故障の原因)
- 濡れた手で触らないでください。(感電・けがの原因)
- ACアダプターを抜き差しする時は、必ず先端のプラグを持って抜き差ししてください。ケーブルを持って抜き差ししないでください。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
- 必ず家庭用コンセントで使用してください。
- ACアダプターやプラグは、根元まで確実に差し込んでください。
- 取扱説明書の内容を必ずお守りください。守らずに使用されると、何らかのトラブルが発生する恐れがあります。

# 使用中のご注意

## ⚠ 警告



プラグを抜く

- 次の場合は使用を中止し、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
  - ・地震・雷
  - ・本体やアダプター・コードからの発煙・異常発熱・異臭・変形



禁止

- 使用中、本機器が熱を帯びることがありますが、安全性に問題はありません。
- 本機器を金属や電化製品に接触させないでください。  
※携帯電話・テレビなど



必ず守る

- 使用の際は、必ず貴金属類や眼鏡・コンタクトレンズを外してください。  
※貴金属類：ピアス・ネックレス・時計など
- 初めて使用する時や慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。
- ヘッドは強く押しつけず肌にあて、同一箇所へ3秒以上固定したままにしないでください。肌トラブルの原因になります。
- 目のまわりのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。
- 使用中に肌や身体に痛み、異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

## ⚠ 注意

**本体使用上のご注意** 以下の項目をよく読んでご使用ください。

1

- 特別なトリートメントは1部位＝週1回行ってください。
- 1週～2週目は週に2回お手入れしてください。その後の3週目からは肌の調子に合わせて週に1回程度お手入れしてください。
- 過度なお手入れはかえって肌によくありません。
- 毎日のトリートメントは1部位＝毎日または2日に1回行ってください。
- 肌の調子に合わせてご使用ください。

2

- フェイシャルトリートメントは、クレンジングや洗顔を行い、化粧や皮脂等の汚れを落とすうえでご使用ください。
- ボディトリートメントは、入浴後等の清潔な肌の状態でご使用ください。

3

- 肌の状態は、体調によっても異なります。
- 肌の様子を見ながら使用し、発疹・発赤・かゆみなど肌に何らかの異常が生じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。

# 保守・点検のご注意

## ⚠ 警告



分解禁止

- 分解・改造・修理をしないでください。修理はご購入店舗または弊社カスタマーセンターにご相談ください。



プラグを抜く

- 本体を掃除するときは、ACアダプターを本体とコンセントから抜いてください。(火災・故障の原因)
- 使用しないときは必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。(火災・故障の原因)



禁止

- ACアダプターやプラグピンにほこりを付着させないでください。(火災・感電・故障の原因)
- 落としたり、ぶついたりしないでください。
- 収納時にコードをアダプターに巻きつけないでください。
- お子様の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
- 次のような場所に保管しないでください。
  - ・直射日光が当たる場所・湿気が多い場所・粉塵が多い場所
  - ・高温または氷点下になる場所・炎天下の自動車内など
  - ・引火の危険がある場所・風雨にさらされる場所
  - ・化学薬品やガスが発生する場所・振動が激しい場所
  - ・暖房器具や熱が発生する器具の近く・磁石の近く



必ず守る

- お掃除の仕方  
水分を含ませ、固く絞ったやわらかい布で拭き取ってください。硬い布で拭くと傷ついたり、機能が低下する原因となります。
- ※アルカリ剤・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤や除光液・磨き粉・熱湯・薬品類は使用しないでください。
- ※美容液やジェルが付着した状態で放置しないでください。

## 点検をしましょう

半年以上使用しなかった本機器を再度使用する際には、使用前に必ず異常がないかを点検してからご使用ください。(LEDの点灯状態・亀裂の有無等) 故障したままでご使用になりますと事故の原因となります。

# 各部の名称

## 本体




## 付属品

- ACアダプター
- スタンド
- 取扱説明書兼保証書

# 各部の名称

## トップカバー

- 本体のトップカバーは着脱可能です。NFCタグ読み取りや、本体のお手入れの際に取り外してください。
- ※ 取り外す際は、本体に対し垂直に引き上げてください。
- ※ 無理に取り外すと破損の原因となりますので、ご注意ください。

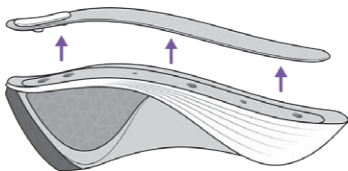

## NFCタグ搭載モデル

- NFC対応機器を本機器にかざすことにより、製品個々にシリアルNo.をご確認いただけます。



対応機種

- iOS: iPhone XS/XR以降
- Android: 全般

※ iPhone 5S/5C～iPhone Xは対応アプリが必要です。  
(App Store内にて「NFC読取」と検索してください)

※ NFC未対応機種ではご使用いただけません。

※ トップカバーを取り外して読み取りしてください。

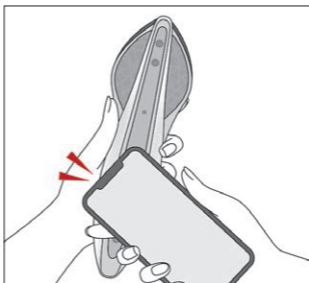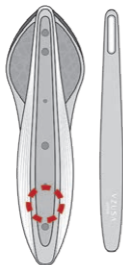

# 機能の説明

## 機能

| ボタン | モード         | 機能   |
|-----|-------------|--|
| IPR | IPRモード      | 断続的に出力されるウルトラパルスが、素早く回転しながら肌に作用します。(IPR=速転断続パルス) |
| LTN | LTNモード      | ウルトラパルスとプラスイオンが同時に出力されます。電気浸透流を利用し、肌に作用します。      |
| UP  | ウルトラパルスモード  | インサートパルス/EMS/中・高周波が同時に出力されます。                    |
| EMS | EMSモード      | 筋肉を動かすことに特化したパルスが出力されます。                         |
| VR  | バイブレーションモード | バイブレーションの振動により、電気刺激が緩和されます。                      |

## LED



緑色LEDが点灯します。  
透明感のある印象的な肌へと導きます。

※ 点灯中、光を覗いたり直視をしないでください。

※ 目の周りのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。

# 本体操作方法

※ 本機器を初めてご使用される際は素子の保護シール(透明シール)を外してください。

① 本体のACアダプター差込口のカバーを開け、ACアダプターを本体・コンセントに差し込みます。

② モードの選択

- 〈IPRボタン〉を押すことで、IPRモードが起動します。
- 〈LTNボタン〉を押すことで、LTNモードが起動します。
- 〈UPボタン〉を押すことで、ウルトラパルスモードが起動します。
- 〈EMSボタン〉を押すことで、EMSモードが起動します。

※ 選択したモードのモードランプが赤色に点灯します。

※ レベル1の状態です。


※ 10秒に1回音が鳴ります。

③ レベルの選択

- レベルは4段階あります。起動中のモードのボタンを押すことにより、レベルを選択できます。

※ 初めてご使用される際はいずれのモードもレベル1から開始し、レベルを上げ心地良いと感じるレベルでトリートメントを行ってください。

※ レベルを下げる際やモードを切り替える際は、本体の電源をOFFにしてから再度設定を行ってください。

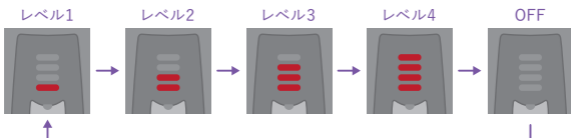

④ バイブレーションの選択

- 〈VRボタン〉を押すことで、バイブレーションモードが起動します。
- バイブレーションモードの体感は2パターンあります。ショート▶ロング▶OFFの順番で切り替わります。

※ バイブレーションモードのみでご使用いただくことも可能です。

⑤ 電源OFF

- 起動中のモードがレベル4の状態、再度ボタンを押すことで電源をOFFにします。

※ 起動から10分後に自動停止します。(停止する5秒前より音が鳴ります。)

⑥ ACアダプターを本体・コンセントから外します。


※ 使用後は本体のACアダプター差込口のカバーを閉じてください。

# トリートメント手順

## トリートメント前

- ① ネックレス、指輪などのアクセサリーや、身につけているすべての貴金属類を外してください。
- ② フェイシャルトリートメントは、通常のクレンジングや洗顔を行い、化粧や皮脂等の汚れを落としたうえでご使用ください。  
ボディトリートメントは、入浴後等の清潔な状態でご使用ください。

## トリートメント

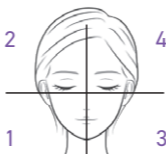

- 全顔のトリートメントをする際は、一度に美容液を塗布するのではなく、上のイラストのように4つのエリアに分けて塗布し、トリートメントを行ってください。

### 毎日のトリートメント

- EMSモード + LTNモード = 合計10分
  - まずはEMSモードで5分間、続けてLTNモードで5分間のトリートメントが効果的です。

### 特別な週1回のトリートメント

- IPRモード + ウルトラパルスモード = 合計10分
  - まずはIPRモードで5分間、続けてウルトラパルスモードで5分間のトリートメントが効果的です。


## トリートメント後

- ① トリートメント後、肌に残った美容液はやさしくなじませ、ジェルは拭き取ってください。
- ② トリートメントが終了したら、水分を含ませた柔らかい布やティッシュなどで本体の汚れを拭き取り、その後乾いたティッシュで水分を拭き取ってください。

# トリートメント手順 (Face)

## EMSモード

- トリートメント部位にジェルを塗布し、トリートメントを行ってください。
- イラストの●の位置で約3秒ずつ順番に肌にヘッドをあててください。
- ①～⑤の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。

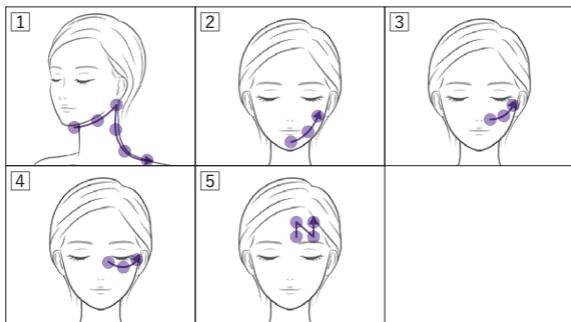

- ※ イラストのトリートメント手順は目安となります。
- ※ トリートメントの途中で乾きを感じたら、ジェルを付け足してください。  
塗布量が少なすぎると肌に刺激を感じたり、トリートメントの効果が発揮されない場合があります。
- ※ トリートメントを行う部分へ6つの素子をすべて肌に密着させてください。
- ※ 使用中、ヘッドの表面に汚れなどが付着してざらつく場合は、柔らかい布やティッシュなどで拭き取ってください。
- ※ 体調が悪い場合には、使用しないでください。
- ※ 過度なトリートメントは肌の負担となります。1日に何度も使用しないでください。

## ⚠ 警告

粘膜や上まぶた、眼球や耳のまわり、のどぼとけ周辺には使用しないでください。

# トリートメント手順 (Face)

## LTNモード ■ IPRモード ■ ウルトラパルスモード


- トリートメント部位に美容液を塗布し、トリートメントを行ってください。
- ゆっくりと常に動かし、同一箇所には3秒以上固定したままにしないでください。
- ①～③の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。



顎下からフェイスラインを通り、耳後ろまで動かします。  
その後耳下腺を通り、肩まで動かします。



額先からフェイスラインを通り、こめかみまで動かします。  
次に小鼻から頬を通り、こめかみまで動かします。  
最後に目頭から目の下を通り、こめかみまで動かします。

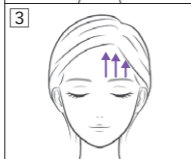

眉毛から髪の毛の生え際まで引き上げるように、下から上へ動かします。

- ※ イラストのトリートメント手順は目安となります。
- ※ トリートメントの途中で乾きを感じたら、美容液を付け足してください。  
塗布量が少なすぎると肌に刺激を感じたり、トリートメントの効果が発揮されない場合があります。
- ※ トリートメントを行う部分へ6つの素子をすべて肌に密着させてください。
- ※ 使用中、ヘッドの表面に汚れなどが付着してざらつく場合は、柔らかい布やティッシュなどで拭き取ってください。
- ※ 体調が悪い場合には、使用しないでください。


### ⚠ 警告

粘膜や上まぶた、眼球や耳のまわり、のどぼとけ周辺には使用しないでください。

# トリートメント手順 (Body)

## 二の腕


- 特別なトリートメント: 片腕15分
- 毎日のトリートメント: 片腕15分

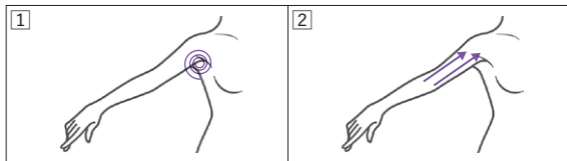

- ① 腕の付け根をクルクルと動かし2~3周します。
- ② 肘の上から二の腕を通り、直線で腕の付け根あたりまで移動します。

## ウエスト

- 特別なトリートメント: 15分
- 毎日のトリートメント: 15分

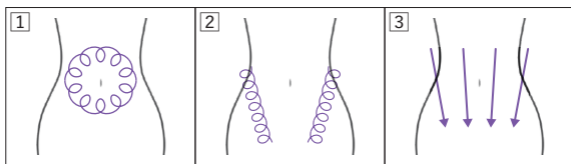

- ① おへその周りをクルクルと動かしながらか1周します。
- ② ウエストの横からクルクルと動かしながらくびれを作るようなイメージで、ソケイリンパまで移動します。
- ③ 上から下へ流すようなイメージで直線で移動します。

## ヒップ

- 特別なトリートメント: 15分
- 毎日のトリートメント: 15分




- ① ヒップラインと太ももの境目からクルクルと動かしながらか、腰の下あたりまで移動します。
- ② ヒップラインと太ももの境目をギザギザと動かしながらか移動します。
- ③ ヒップラインと太ももの境目から直線で、腰の下あたりまで移動します。

# トリートメント手順 (Body)

## 足(表・裏)


- 特別なトリートメント:片足15分
- 毎日のトリートメント:片足15分

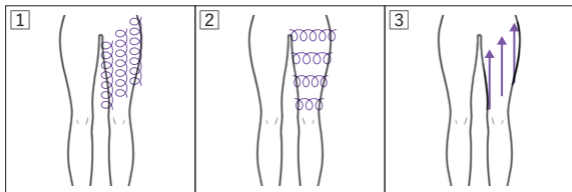

- ① 膝上(膝裏)から太ももの付け根(ヒップライン)までクルクルと動かしながら下から上に移動します。
  - ② 膝上(膝裏)から太ももの付け根(ヒップライン)までクルクルと左右に動かしながら下から上に移動します。
  - ③ 膝上(膝裏)から太ももの付け根(ヒップライン)まで直線で下から上に移動します。
- ※ 表と裏は同じような動かし方で行ってください。

## ふくらはぎ

- 特別なトリートメント:片足15分
- 毎日のトリートメント:片足15分

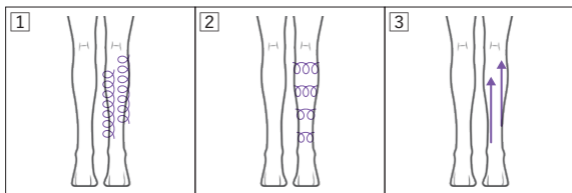

- ① 足首あたりから膝裏までクルクルと動かしながら下から上に移動します。
- ② 足首あたりから膝裏までクルクルと左右に動かしながら下から上に移動します。
- ③ 足首あたりから膝裏まで直線で下から上に移動します。

# 製品仕様

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 商品名         | VZUSA II (メデューサー ツー)                 |
| ACアダプター定格電源 | 入力 100-240V ~ 50/60Hz<br>出力 12V = 3A |
| 本体定格電源      | 入力 12V = 2A                          |
| 消費電力        | 最大18W                                |
| 外形寸法        | 本体:約H214×W64×D63.5mm                 |
| 質量          | 本体:約182g                             |

# 保証規定

■保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。万が一、ご購入日から保証期間中に故障が発生した際は、本保証書のコピーを添付の上、ご購入店舗または弊社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。

※シリアルNo.・ご購入日・ご購入店舗・お客様名・ご住所・お電話番号の記載がない場合、保証書は有効となりませんので、記入漏れの無い事を事前に必ずご確認ください。

※付属品(ACアダプター・スタンド・取扱説明書兼保証書)は保証対象外となります。

※保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。

■保証期間内でも次の場合は有償修理とさせていただきます。

- A. 保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合
- B. 本保証書にシリアルNo.・ご購入店舗・ご購入日・お客様名・ご住所・お電話番号の記載がない場合
- C. 使用者側での輸送・移動時等の落下・水没等によりお取り扱いが不適切なために生じた損傷や故障の場合
- D. 火災・天災・異常電圧により損傷・故障した場合
- E. 接続している他の機器に起因して、本製品が故障した場合
- F. 本製品付属の専用ACアダプター以外を使用し故障した場合
- G. 弊社以外で修理・調整・改造をした場合
- H. 本保証書のご提示がない場合

■この保証書は国内で使用される場合にのみ有効です。

※海外で購入された際は、製造メーカーより発行された正規代理店証明書がある場合のみ保証対象内です。

■送料について

- a. 保証期間内の送料は往復とも弊社負担とさせていただきます。(日本国内のみ有効)
- b. 保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。

■本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。